



LA CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Cette thérapie reconnue combinant la **cryothérapie par eau glacée** et la **compression par air**, permet de **diminuer par deux les douleurs**, d'**accélérer la cicatrisation** et offre ainsi une **reprise plus rapide de l'activité physique**.

Le Moove sport va optimiser votre retour sur le terrain, il sera une aide incontournable à vos échéances sportives et votre allié pour la récupération.

Le Moove sport concerne les indications suivantes :

Gestion des traumatismes, préparation et récupération musculaire, réathlétisation, jambes lourdes.

De l'eau glacée traverse l'attelle, en combinaison avec une pression d'air continue ou alternée afin que la température cutanée passe de 30° à 6° C en moyenne, ce qui va soulager la zone traitée et accélérer le rétablissement tout en limitant les prises médicamenteuses et favoriser l'amplitude du mouvement.



Le Moove sport avec son sac de transport et son attelle genou

LES EFFETS

DIMINUE la douleur

RÉDUIT le processus inflammatoire

RÉSORBE les oedèmes

ACCÉLÈRE la cicatrisation tissulaire

LE CONCEPT D'EASYCRYO


Performance : Le modèle MOOVE propose une pression maintenue dont l'objectif est de traiter les plans profonds et une pression alternée pour favoriser la récupération et permettre un drainage des inflammations.

Efficacité : Le froid intense va soulager immédiatement et va bloquer le processus inflammatoire. Cette technologie s'utilise en préparation afin d'augmenter l'endurance et en récupération pour drainer les toxines. 10 à 30 minutes de soins suffisent pour soulager, relancer les échanges, drainer et détendre la zone musculaire.

Simplicité : Le réservoir d'eau glacée peut être également préparé au congélateur afin de prolonger la durée des traitements. Nos appareils fonctionnent sur secteur ou sur batterie (5 heures). L'ensemble est facilement portable. L'appareil peut être fourni avec une sac de transport



Moove sport

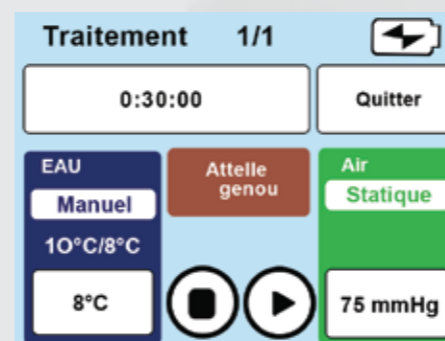

NOS AVANTAGES

- Système programmé et modifiable
- Purge automatique des attelles pour une meilleure hygiène.
- Housse pour attelle lavable en machine
- Réservoir d'eau glacée : avec glaçons ou au congélateur (3 heures de froid)



bac à eau

LES ATTELLES



ÉPAULE



CUISSE



CHEVILLE

MEMBRES SUPÉRIEURS

- Epaule droite et gauche
- Coude / Poignet

MEMBRES INFÉRIEURS

- Genou (L. 38 cm)
- Cuisse (L. 50 cm)
- Cheville
- Hanche droite et gauche

DÉTAILS TECHNIQUES

	MOOVE
Nombres de sorties	1
Pression air min/max	0 mmHg / 75 mmHg
Type de pression	dynamique/constante
Température de l'eau	1° à 8°C conseillée
Programme pré-établi	1 (modifiable)
Cycle de froid et de repos	Fonction repeat
CE med	LNE/GMED 0459

LE MOOVE SPORT

LA CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

“ Un véritable outil professionnel pour un usage personnel ”



easyCryo®

Zone ECOPARC
27 Rue Mezière Christin
34690 FABRÈGUES - France



www.easycryo.fr

Tél. +33 (0)4 99 64 21 05
Fax. +33 (0)4 99 64 21 06
olivia.beldame@easycryo.fr



easyCryo®