


📎 LOS ATENTOS



CODO / MUÑECA



MUSLO (L. 50 CM)

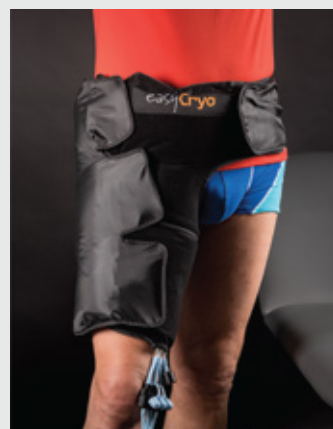

CADERA

MIEMBRO SUPERIORES

- Hombro derecho e izquierdo.
- Codo / muñeca

MIEMBRO INFERIOR

- Rodilla (L. 38 cm)
- Muslo (L. 50 cm)
- Tobillo
- Cadera derecha e izquierda.

⚙️ DETALLES TÉCNICOS

| | TWIN | MOOVE |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Número de salida | 2 | 1 |
| Min / max presión de aire | 0 mmHg / 75 mmHg | 0 mmHg / 75 mmHg |
| Tipo de presión | dinámica / constante | dinámica / constante |
| Temperatura del agua | 0° à 3°C aconsejable | 0° à 3°C aconsejable |
| Programa de 2 fases | 4 | 4 |
| Programa | 10 + 10 libres | 10 + 10 libres |
| Ciclo de frío y descanso. | función repeat | función repeat |
| CE med | LNE/GMED 0459 | |

CIRUGÍA ORTOPÉDICA
AMBULATORIO



❶ CRIOTERAPIA COMPRESIVA

La crioterapia por compresión es un complemento esencial del protocolo de manejo en cirugía ambulatoria. Este dispositivo médico permite cumplir con los requisitos del quirófano en relación con la atención en crioterapia y esto, hasta la salida del paciente.

Se recomienda utilizar una presión constante en la sala de recuperación para limitar el sangrado y la presión dinámica en la sala para promover la reabsorción del edema.



TWIN



First con la férula del muslo

★ EFECTOS

- REDUCE** el dolor
- REDUCE** el proceso inflamatorio.
- RESOLVER** edemas
- ACELERA** el cicatrización de los tejidos.
- PERMITE** al paciente salir más rápido (D y D + 1)

❷ EL CONCEPTO DE EASYCRYO

Rendimiento : nuestra nueva gama de equipos de crioterapia por compresión ofrece presión estática y / o dinámica. El modo automático regula el flujo de agua para controlar la temperatura de la piel, mientras que el modo manual deja el control al terapeuta.

La personalización del tratamiento y el respeto de la fisiología tisular garantizan el rendimiento terapéutico.


Eficiencia : Twin y Moove ofrecen programas específicos para el seguimiento postoperatorio. El modelo TWIN, permite tratar a 2 pacientes de forma independiente, está destinado a las salas de despertador.

El modelo MOOVE es más apropiado para la atención en el dormitorio y puede seguir al paciente desde la sala de recuperación hasta el final de

Sencillez : el tanque de agua con hielo también se puede preparar en el congelador para prolongar la duración de los tratamientos. Nuestros dispositivos funcionan con red o con batería (5 horas).



Moove con su consola

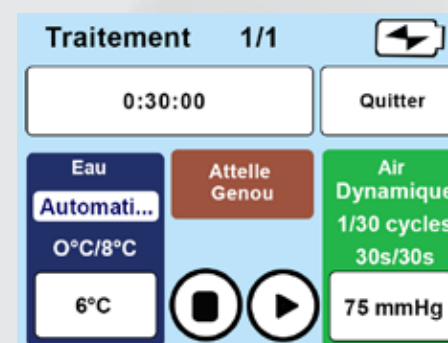

+ VENTAJA

- Personalización del cuidado gracias a la programación.
- Depósito de agua fría: con cubitos de hielo o en congelador (3 horas de garantía en frío).
- Purga automática de férulas para una mejor higiene.
- Cubierta de férula lavable a máquina



bac à eau