



## KOMPRESSION KRYOTHERAPIE

Die Kompressive Kryotherapie ist ein wesentlicher Bestandteil des Behandlungsprotokolls in der Patienten Chirurgie. Dieses Medizinprodukt erfüllt die Anforderungen des Operationssaals an die Versorgung in der Kryotherapie und dies bis zum Austritt des Patienten.

Es wird empfohlen, im Aufwachraum einen konstanten Druck anzuwenden, um Blutungen zu begrenzen und dann den dynamischen Druck um die Ödem Resorption zu fördern

Für eine bessere Heilung ist es ratsam, die Auswirkungen der Kälte unmittelbar nach dem Verlassen der Klinik aufrechtzuerhalten.



TWIN

## DAS ICE COMPRESSION KONZEPT

**Leistung** : Unsere neuen Geräte für die kompression Kryotherapie bieten eine effektive Kryotherapie in Kombination mit einer konstanten oder intermittierenden pneumatischen Kompression. Der AUTOMATISCHE Behandlungsmodus reguliert den Kryo Wasserfluss, um die Hauttemperatur zu regeln, während der MANUELLE dem Therapeuten das Temperaturmanagement überlässt. Die IceCompression Geräte gewährleisten eine therapeutische Leistung, indem sie die Pflege unter vollständiger Berücksichtigung der Gewebephysiologie anpassen.

**Effizienz** : TWIN, FIRST Premium und MOOVE Geräte bieten spezielle Programme für die Überwachung nach der Operation an. Das TWIN-Modell ermöglicht zusätzlich die unabhängige Behandlung von 2 Patienten in den Aufwachraum. Das FIRST Premium liefert dank seiner Peltier Technologie dauer Kälte. Das MOOVE-Modell ist die mobile Version unserer Produktreihe, die für die stationäre Pflege im Patientenzimmer geeignet ist und den Patienten vom Aufwachraum bis zum Ende seiner Pflege begleitet.

**Einfachheit** : Um die Nutzungsdauer zu verlängern, kann der mobile Eiswassertank auch im Gefrierschrank gekühlt werden. Unsere Geräte werden sowohl mit Netzstrom als auch mit Akku betrieben (5 Stunden).



Moove mit seiner Konsole



First mit der Oberschenkelschiene

## EFFEKTE

- FÖRDMT** die Vasokonstriktion
- REDUZIERT** die Blutungen
- RESORBS** Ödeme
- ERMÖGLICHT** ein schnelleres Verlassen des Patienten (D und D + 1)
- BESCHLEUNIGT** das Rückkehr zur Aktivität



## DIE VORTEILE

- Personalisierung der Behandlung dank der freien programmierung
- Kaltwassertank: mit Eiswürfeln oder am Gefrierschrank (3St. Kaltgarantie)
- Automatische Spülung der Schienen für eine bessere Hygiene
- Maschinenwaschbare Schienenschutzhüllen



Wassertank

Chirurgie und Legung Manschettet

Behandlung im Aufwachraum

Behandlung im Patientenzimmer

Behandlung von 3 bis 18 h von 0 ° bis 3 ° C

Patiententlassung

Behandlung im Rehabilitationszentrum oder zu Hause




## DIE MANSCHETTEN



ELLENBOGEN / HANDGELENK



OBERSCHENKEL (L. 50 CM)

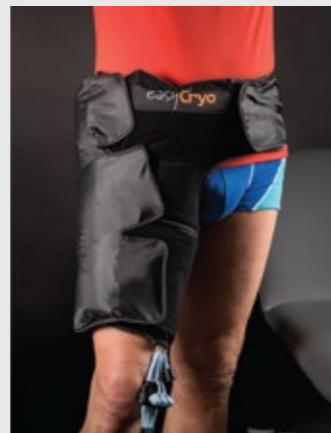

HÜFTE

### OBERE EXTRÄMITÄT

- Rechte und linke Schulter
- Ellenbogen / Handgelenk

### UNTERE EXTRÄMITÄT

- Knie (L. 38 cm)
- Oberschenkel (L. 50 cm)
- Knöchel
- Rechte und linke Hüfte

## TECHNISCHE DETAILS

	TWIN	MOOVE	MOOVE PREMIUM
Nombres de sorties	2 unabhängig	1 unabhängig	1 unabhängig
Pression air min/max	0 mmHg / 75 mmHg	0 mmHg / 75 mmHg	0 mmHg / 75 mmHg
Type de pression	dynamisch / konstant	dynamisch / konstant	dynamisch / konstant
Température de l'eau	0 bis 3 °C empfohlene	0 bis 3 °C empfohlene	0 bis 3 °C empfohlene
Programmes à 2 phases	4	4	4
Programmes	10 + 10 Frei	10 + 10 Frei	10 + 10 Frei
Cycle de froid et de repos	Funktion Wiederholung	Funktion Wiederholung	Funktion Wiederholung
CE med	LNE/GMED 0459		

## ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

